

Maskenbox-Halterung Art.-Nr. 1423972
Mask box holder Art.-No. 1423972

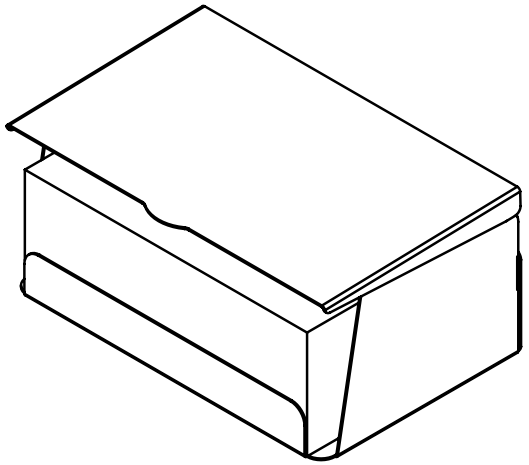

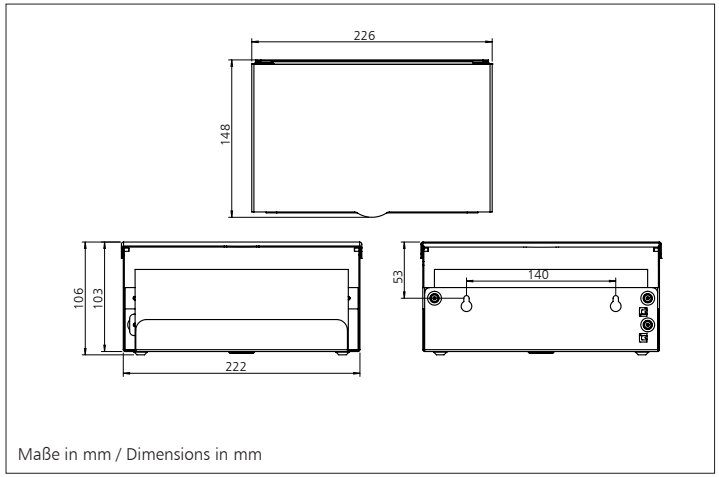

Maße in mm / Dimensions in mm


Montagemöglichkeiten/ Mounting options

Tischmontage:

- Gummifüße gleichmäßig an der Unterseite aufkleben

Table mounting

- stick the rubber feet evenly on underside

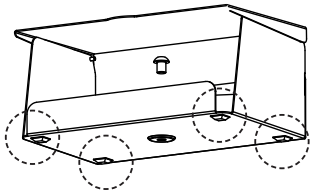


Wandmontage:

- mit beiligen Schrauben und Dübel an der Wand befestigen

Wall mounting:

- fixing to the wall with supplied dowels and screws

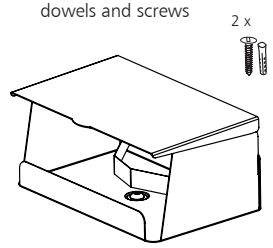



Säulenmontage:

- kompatibel mit Artikel 1422671 (RX 5 T Standfuß)
- mit beiliegender Schraube befestigen

Stand assembly:

- compatible with article 1422671 (RX 5 T stand)
- use attached screw

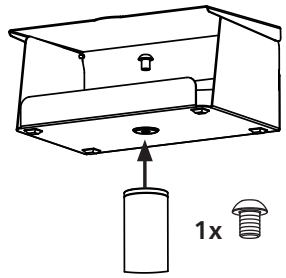

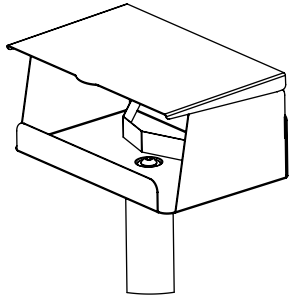

Geeignetes Füllgut:

Maskenbox mit den Abmessungen
max. Breite 22 x Tiefe 12 x Höhe 10 cm

Filling material:

Mask box with dimensions
max. wide 22 x depht 12 x height 10 cm

Reinigungs- und Pflegehinweise

- Maskenbox-Halterung mit einem leicht angefeuchteten Lappen reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel

Cleaning and care instructions

- Wipe mask box holder with a lightly moistened cloth (water)
- Please do not use acidic, caustic (chlorous) purifiers or
- scouring powder.
- Disinfection is possible with appropriate surface disinfectants.

Lieferumfang:

☐ 4x Gummifüße
☐ 2x Schrauben und Dübel
☐ 1x metrische Schraube M8 x 10

Scope of Delivery:

☐ 4x Rubber feet
☐ 2x Screws and plugs
☐ 1x Metric screw M8 x 10

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

1424640/02223/1.1

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG
Lindenau 27 • 47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customercare@ophardt.com • **www.ophardt.com**